

Talo Classic

12900 Der Talo Classic ist eine besonders bequeme und komfortable Ruhesessel. Dank des Classic Mechanismus können Sitzfläche und Rückenlehne mit minimalem Kraftaufwand und ohne Hebel nach hinten verstellt werden.

Untergestell

- Das Untergestell besteht aus zwei Seiten in massiver Buche die durch einen festen Buchequerträger miteinander verbunden sind.
- Verleimte Verzapfung.
- Die Seiten sind fest miteinander verbunden, mittels eines massiven Holzquerträgers und Metallrahmens.
- Ergonomische Armlehnen erleichtern das Hinsetzen und Aufstehen.
- Komfortable, leicht gebogen Armlehnen von ± 7 cm Breite
- Alle Seiten und Ecken sind abgerundet.
- Die Beine sind mit Kunststoffgleitern ausgestattet.

Sitz

- Abnehmbarer Sitz in melaminharzbeschichteter MDF-Platte, Dicke 12 mm.
- Der abgerundete Sitz vorn behindert den Blutkreislauf nicht.
- Komfortable Sitzhöhe von 47 cm.
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. 2 Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Komplett gepolstert mit doppelter Steppnaht.

Rückenlehne

- Ergonomisch vorgeformte Schale aus Schichtholz, Dicke 12 mm.
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. 3 Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Komplett gepolstert mit doppelter Steppnaht.
- Mit einem höhenverstellbaren und abnehmbaren Kopfstütz-/Nackenkissen ausgestattet.

Beinstütze

- Beinstütze aus Schichtholz, Dicke 10 mm. Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert.

Classic Mechanismus

- Einfach in 3 unterschiedlichen Positionen verstellbar: Sitzposition, Lese- und Relaxposition.
- Der Mechanismus hebt zuerst die Beine auf. Danach wird es möglich, den ganzen Sessel zu kippen.
- Einfache Verstellung mit minimalem Kraftaufwand und ohne Hebel.
- Optimaler Sitzkomfort in jeder Position, dank des konstanten Winkels zwischen Rückenlehne und Sitz während des Kippens.
- Optimale Beinunterstützung dank der teleskopischer Beinstütze.
- In der Sitzposition ist die Beinstütze zur Förderung des Aufstehens nach innen gekippt.

Farben


Bitte Sie uns um unser reichhaltiges Angebot.
Musterkarte + Muster auf Anfrage erhältlich.



Maße

12900 | B 68 x D 84 x H 116 cm

- Sitzhöhe: 45,5 cm
- Sitztiefe: 51 cm
- Sitzbreite: 53,5 cm
- Höhe der Armlehnen: 64 cm

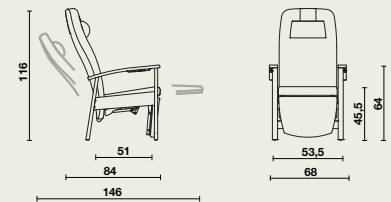

Materialien und Gestaltung

- Holz: Buche (massiv), Schichtholz, MDF-Platte.
- Metall: epoxybeschichtet (hellgrau).
- Feuerhemmender Schaum.
- Bezug: siehe Kollektion.
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte und Desinfektionsmittel.

Weitere Informationen über die **Materialien, Konstruktion und Wartung**: Bitte Sie uns um unsere Materialdateien.

Optionen

- Essbrettbefestigungen.
- Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum und bi-elastischem Bezug.
- Anatomisches Reduktionskissen.
- Ohrenbacken.
- Das obere Rückenteil ist abnehmbar.
- Integrierte Hilfsrollen.
- Geschlossene Seiten.
- Haken für Zubehör.
- Fixationsbügel.
- Hülse für Infusionsständer.
- Essbretthalter auf Rückenlehne.

